



NOVUS™

Nasal-CPAP-Maske



Homecare ▪ Novus Nasal-CPAP-Maske




Novus™ Nasal-CPAP-Maske

Die Novus Nasal-CPAP-Maske ist ein komfortables und leichtes Produkt für erwachsene Patienten (>30 kg), denen eine CPAP- oder Bilevel-Therapie im heimischen Bereich verordnet wurde.

Novus wurde entwickelt, um eine angenehme und einfache Lösung für Homecare-Patienten zu bieten. Die Maske besteht nur aus wenigen Einzelteilen, was sowohl das Anlegen und Anpassen, als auch die Montage, Demontage und Reinigung zu Hause vereinfacht.

Novus ist in zwei Größen erhältlich und sorgt durch eine weiche Silikonabdichtung für einen komfortablen und effektiven Sitz, wodurch sie für einen Großteil der Anwender geeignet ist.

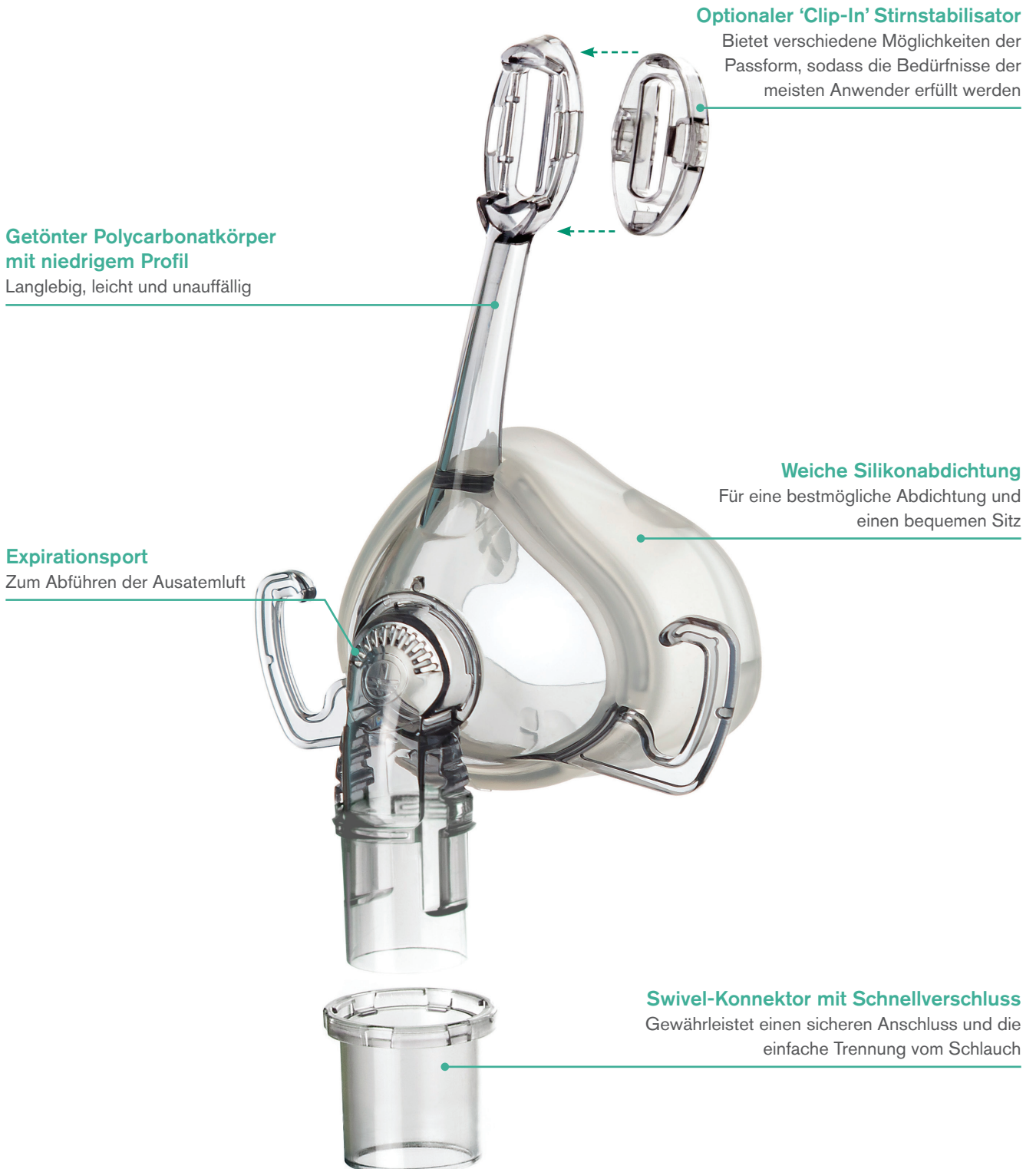




Intersurgical Novus™ Nasal-CPAP-Maske

Atmungsaktives Kopfgeschirr

Komfortabel für den Patienten

Optionaler Schnellspannclip

Ermöglicht einen optimalen Sitz der Maske und eine individuelle Anpassung an verschiedene Kopfformen.

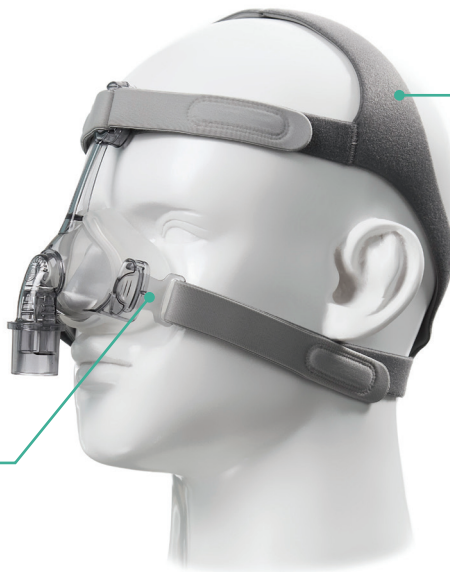

Bestellinformationen

Die Novus Nasal-CPAP-Maske ist in den beiden Größen Medium und Groß erhältlich.

Artikelnr.	Produkt	Sprachen in der Gebrauchsanweisung	VE
7770000	Novus Nasal-CPAP-Maske, Groß	Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch	8
7790000	Novus Nasal-CPAP-Maske, Medium	Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch	8

Zubehör

Artikelnr.	Produkt	VE
7776000	Novus Nasal-CPAP-Maske Kopfgeschirr (beinhaltet Kopfband und Schnellverschluss-Clip)	20
5318000	22mm Smoothbore Polypropylen-Schlauch mit weichen Endkonnektoren, 22ID-22ID, 1.8m	50
5418000	15mm Smoothbore Polypropylen-Schlauch mit weichen Endkonnektoren, 22ID-22ID, 1.8m	60



Anlegen der Maske

So erhalten Sie eine luftdichte und komfortable Passform:



1. Entfernen Sie den Swivel-Konnektor von der Maske, indem Sie den Schnellverschluss betätigen.



2. Verbinden Sie den Swivel-Konnektor mit Ihrem Geräteschlauch.



3. Stützen Sie Kopfgeschirr und Maske.



4. Platzieren Sie die Masken-Abdichtung über der Nase und halten sie dort fest. Ziehen Sie das Kopfgeschirr über den Kopf. Die unteren Bänder dürfen sich nicht unter den Ohren befinden.



5. Vergewissern Sie sich, dass die Bänder nicht verdreht sind und befestigen Sie die verbleibenden unteren Bänder im dafür vorgesehenen Haken.



6. Die Passform der Maske kann angepasst werden, indem Sie die oberen Bänder lösen, wie gewünscht gleichmäßig festziehen und anschließend wieder am Kopfgeschirr befestigen.



7. Lösen Sie nun auch die unteren Bänder, ziehen Sie diese gleichmäßig fest und befestigen sie wieder am Kopfgeschirr, um den Sitz der Maske vollständig zu justieren. Der Sitz sollte sicher, aber nicht zu fest sein.



8. Stellen Sie sicher, dass das CPAP- / Bilevel-Gerät eingeschaltet ist. Aus dem Geräteschlauch sollte Luft herausströmen. Befestigen Sie den Swivel-Konnektor und den Geräteschlauch am Winkeladapter der Maske, indem Sie diesen mit einem "Klick" einrasten lassen.



9. Die Bänder des Kopfgeschirrs nachjustieren, um Luftlöcher innerhalb der Masken-Abdichtung zu beseitigen. Die Maske nicht zu fest ziehen. Bei anhaltenden Undichtigkeiten, heben Sie die Masken-Abdichtung an und platzieren Sie diese erneut, bevor Sie die Bänder anpassen.